C-Kit Pro Advanced Tool



結晶化のためのプログラムソフト2種類と結晶取出し治具のセットです


① CD(カウンターディフュージョン) 法拡散時間経過シミュレーションソフト CD法キャピラリー中の拡散時間経過をシミュレーションするソフトです。


② C-Profile 結晶化条件最適化ソフト

タンパク質試料の基本的な物理化学的性質を、アミノ酸配列から計算する ソフトです。タンパク質のアミノ酸配列(FASTA形式)をもとに、分子量、 電荷/電荷密度のpH依存性、pI、ε、GRAVY等タンパク質の物理化学的性質 を計算します。

③ 結晶取出し治具

結晶をキャピラリーから取出す際に便利な器具です。

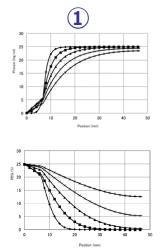

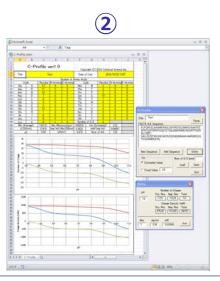



製品番号	製品名	内容・入数	希望小売価格 (税抜)
		① CD法拡散時間経過シミュレーションソフト	
CRT209	C-Kit Pro Advanced Tool	②C-Profile結晶化条件最適化ソフト	¥13,000
		③結晶取出し治具	

◆ お問い合わせ先

株式会社 コンフォーカルサイエンス



 $\pm 158 - 0081$ 東京都世田谷区深沢五丁目14番15号

TEL 03-3864-6606 FAX 03-6411-6261

MAIL: info@confsci.co.jp http://www.confsci.co.jp/ 販売代理店

株式会社 池田理化

〒101-0044

東京都千代田区鍛冶町1-8-6 神田KSビル TEL: 03 (5256) 1830 FAX: 03 (5256) 1899

MAIL: seiyaku@ikedarika.co.jp